

ROLLATORER

MOBILEX UDVALG AF ROLLATORER

INDHOLD

LEOPARD rollator.....	3
GEPARD rollator.....	4
BUFFALO HD rollator.....	4
ROLLOGUARD.....	5
PANDA COMFORT rollator.....	5
TIGER & TIGER OUTDOOR rollator.....	6
LION rollator.....	7
PANTHER rollator.....	7
PUMA AIR rollator.....	8
JAGUAR rollator.....	9
IMPALA rollator.....	9
TILBEHØR.....	10
BISON gangbord.....	11
DYNAWALK gangbord.....	11

Almen beskrivelse

Mobilex-rollatorer er af høj kvalitet, brugervenlige, stabile, lette at anvende og bidrager til "a better life in motion". Den rigtige rollator til enhver situation og udfordring. Uanset hvad du leder efter, finder du det her. Vores store udvalg af rollatorer imødekommer brugernes forskelligartede behov.

Selvom vores rollatorer er opkaldt efter hurtige dyr, er det dig der bestemmer hastigheden såvel som model og farve. Alle Mobilex-rollatorer er naturligvis udstyret med velfungerende og brugervenlige bremses af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort. En let og meget stabil rammekonstruktion giver også den nødvendige stabilitet under kørsel. Mobilex-rollatorer fås med en sædebredde helt op til 56 cm og enkelte kan bruges af personer med en vægt op til 200 kg. Med en maksimal højde af kørehåndtagene på op til 112 cm vil også de højeste kunne finde den rigtige model. Uanset om det er til indendørs eller udendørs brug tilbyder vi hos Mobilex A/S rollatorer der passer til alle anvendelsesområder. Vi har også flere moderne og elegante modeller til patienter med gigt i vores repertoire. På de næste sider kan du fordybe dig i vores brede udvalg af Mobilex rollatorer og et omfattende tilbehørsprogram. Finder du ikke det, du søger, er du meget velkommen til at kontakte os eller en af vores mange kvalificerede Mobilex-forhandlere.

Yderligere oplysninger?

På disse sider finder du et lille udvalg af vores omfattende produktsortiment. Se hele vores sortiment på vores hjemmeside www.mobilex.dk. Scan QR-koden og kom direkte ind på vores hjemmeside, hvorfra du også kan downloade vores katalog.



LEOPARD ROLLATOR



Mobilex letvægtsrollator **Leopard** har en aluminiumsramme i rød, blå, grøn eller antracitgrå. Rollatoren foldes nemt sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt, og er dermed let at transportere. Rollatoren er som standard udstyret med et rygbælte, der giver sikkerhed og støtte når sædet benyttes. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På fronten er der monteret en indkøbstaske, som er forsynet med to håndtag, så den let kan afmonteres og bruges separat. De store hjul gør, at rollatoren er god og stabil både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremsere, der bremsere på baghjulene. Ved baghjulene er der monteret en integreret trædepedal for at lette forcering af mindre forhindringer. Godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Rollator Leopard	Standard 312301 (rød) 312304 (antracit) 312309 (blå) 312300 (grøn) 313303 (platin)	Standard + Softhjul 312308 (rød) 312306 (antracit) 312314 (blå) 312313 (grøn) 31230A (platin)	Small 312302 (antracit) 312319 (rød)	X-Small 31230K (antracit)	Small med Softhjul 312318 (antracit) 31230E (rød)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	63 - 79 cm	66 - 86 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	130 - 165 cm	135 - 170 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm	55 cm	50 cm	55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	7,4 kg	7,6 kg	7,1 kg	6,9 kg	7,3 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion				
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm				

GEPARD ROLLATOR

Mobilex letvægtsrollatoren Gepard har en kulfiberramme og en totalvægt på kun 5 kg. Den foldes nemt sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Leveres som standard med stokkeholder, rygbælte samt en aftagelig indkøbstaske. Rollatoren er let at åbne og folde, og med sine store hjul er den velegnet til brug både udendørs og indendørs. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden. Rollatoren leveres med to låsbare bremsere på baghjulene og er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg (200 kg for HD-modellen).



Rollator Gepard	Standard 312401 (sort) 312403 (gul) 312404 (lilla/sort)	Med SOFT hjul 312406 (sort) 312407 (gul) 312408 (lilla/sort)	Small 312402 (sort)	HD * 312405 (sort)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	150 - 200 cm	135 - 170 cm	150 - 200 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm	55 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	60 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	5,4 kg	5,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion			
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm			

BUFFALO HD ROLLATOR

Mobilex letvægtsrollatoren Buffalo HD har en forstærket aluminiumsramme. Rollatoren foldes sammen sideværts, og i sammenfoldet stand fylder den minimalt. Rollatoren er som standard udstyret med en stokkeholder og et rygbælte. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran er der monteret en let aftagelig indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med to håndtag, så den nemt kan afmonteres og anvendes separat. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Skubbehåndtagene kan nemt og uden brug af værktøj justeres i højden. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremsere, der bremsere på baghjulene og nemt kan aktiveres. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på, for at lette forcering af små forhindringer. Buffalo HD er testet og godkendt til en brugervægt op til 200 kg.



Rollator Buffalo HD	Standard Varenr. 312305	Small Varenr. 312307	Standard med SOFT hjul Varenr. 312385	Small med SOFT hjul Varenr. 312387
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	74 - 102 cm	66 - 86 cm	74 - 102 cm	66 - 86 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	125 - 170 cm	150 - 200 cm	125 - 170 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm	62 cm	55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm	68 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	7,8 kg	7,5 kg	7,9 kg	7,6 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremsere	2 låsbare med parkeringsfunktion			
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm			

ROLLOGUARD

RolloGuards innovative og faldforebyggende bremsesystemer er et perfekt match med vores Mobilex kvalitetsrollatorer. RolloGuards faldsikring til rollatorer reducerer risikoen for fald eller faldskader med en rollator. Med den patenterede faldforebyggelsesteknologi forhindres utilsigtede bevægelser, hvilket muliggør en mere sikker mobilitet. RolloGuards Instant Fall Prevention er kompatibel med produktlinjerne **Buffalo**, **Gepard**, **Leopard** og **Tiger** rollatorer. RolloGuard Fall Prevention anvender "Transversor"-teknologien, der beskytter mod utilsigtede bevægelser og gør mobiliteten mere sikker - for a better and safer life in motion.

Justerbart beskyttelsesniveau

En rollator udstyret med RolloGuard er mærket med et klistermærke på bremsetromlen. Dette mærke har en specifik farve med dertilhørende beskrivelse og anvendelsesformål. Der skelnes mellem de tre beskyttelsesniveauer; høj (rød), mellem (gul) og lav (grøn), som alle har forskellige følsomheder, hvilket påvirker aktiveringen af faldsikringen.



PANDA COMFORT ROLLATOR

Den nye letvægtsrollator **Panda Comfort** har en mørkeblå aluminiums-ramme. Rollatoren kan let klappes sammen sideværts, og i sammenklappet stand fylder den minimalt og er dermed let at transportere. Rollatoren er som standard udstyret med et rygbælte, der giver sikkerhed og støtte, når sædet bruges. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. På fronten er der monteret en lukket indkøbstaske, som er forsynet med to håndtag, så den let kan afmonteres og bruges separat. De store softhjul gør, at rollatoren er god og stabil både til inden- og udendørsbrug. Derudover sørger de store hjul også for en god stødabsorbering. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden helt uden brug af værktøj. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremses, der bremses på baghjulene. På rammen tæt ved baghjulene er der monteret to trædepedaler for at lette forcering af selv mindre forhindringer. Som standard er Panda Comfort udstyret med: en transportlås, en aftagelig lukket indkøbstaske, et rygbælte og en stokkeholder. Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Panda Comfort Rollator	312601
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	77,5 - 99,1 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	65 cm / 26,4 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	45,5 cm
Længde (dybde)	77,5 cm
Vægt	9,44 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 285 mm x 45 mm

TIGER / TIGER OUTDOOR ROLLATOR

Mobilex Arthritis Rollatorer **Tiger** og **Tiger Outdoor** er baseret på de elegante rollatorer Leopard (Tiger) og Lion (Tiger Outdoor) og med tilsvarende egenskaber og funktioner. Derudover er de bløde og behagelige underarmsstøtter med deres bremsehåndtag justerbare i dybde, vinkel og højde. Foruden modellen 312201 er underarmsstøtterne desuden indstillelige i to vinkler på hhv. 22,5° og 45°. Rollatoren er ekstremt stabil og let at manøvrere. Den har en letvægtsaluminiumsramme, som let kan foldes sammen, når den skal opbevares eller transporteres. Rollatoren har store, letløbende hjul og glatte, låsbare bremses. I kørestilling er den sikret mod uønsket foldning. En robust rammekonstruktion og håndtag sikrer en optimal brugervenlighed. Tiger Standard er kun godkendt til indendørs brug på plan gulve og til en brugervægt op til 150 kg. Modellen Tiger Outdoor er også godkendt til udendørs brug og en brugervægt op til 200 kg.

Mobilex arthritis rollator Tiger	Standard Varenr. 312201 (antrasitgrå) Varenr. 312211 (rød)	Med drejelige armlæn Varenr. 312202 (metallic brun)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	90 cm - 115 cm	90 cm - 115 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 200 cm	150 - 200 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 / 22,5 cm	62 / 22,5 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	46 cm	46 cm
Længde (dybde)	66 cm	66 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,5 kg	9,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul (for og bag)	200 x 35 mm	200 x 35 mm



Mobilex arthritis rollator Tiger Outdoor	Antrasitgrå Varenr. 312205	Metallic brun Varenr. 312206
Højde af underarmstøtterne (justérbar)	87 - 110 cm	87 - 110 cm
Anbefalede brugerhøjde	140 - 185 cm	140 - 185 cm
Sædehøjde	62 cm	62 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	71 cm / 31 cm	71 cm / 31 cm
Siddebredde / Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm / 46 cm	56 cm / 46 cm
Længde (dybde)	77 cm	77 cm
Vægt (+ taske 380 g)	12 kg	12 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm	

LION ROLLATOR

Mobilex letvægtsrollator **Lion** har en forstærket aluminiumsramme og ekstra store og bløde hjul for optimal komfort og stabilitet. Rollatoren foldes sammen sideværts og er let at transportere i en bil eller lignende. Rollatoren er som standard udstyret med en stokkeholder og et rygbælte, der giver sikkerhed og støtte når sædet benyttes. Sædet er lavet i kraftig slidstærk nylon. Foran er der monteret en let aftagelig indkøbstaske. Indkøbstasken er forsynet med to håndtag, så den nemt kan afmonteres. De store hjul gør, at rollatoren er god både til indendørs og udendørs brug. Håndtagene kan nemt og uden brug af værktøj justeres i højden. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremses, der bremses på baghjulene og nemt kan aktiveres. Ved baghjulene er der monteret en trædepedal til at træde på for at lette forcering af forhindringer. Rollatoren er testet og godkendt til brugervægt op til 200 kg.



Rollator Lion	Standard Varenr. 312372 (antrasitgrå) Varenr. 312374 (metallic brun)	Small Varenr. 312371 (antrasitgrå) Varenr. 312373 (metallicbrun)
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	90-112 cm	77-90 cm
Anbefalede brugerhøjde	170 - 220 cm	165 - 175 cm
Sædehøjde	62 cm	53 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	68 / 26 cm	68 / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	56 cm	56 cm
Længde (dybde)	76 cm	76 cm
Vægt (+ taske 380 g)	9,3 kg	9,0 kg
Max. belastning (rollator / taske)	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul (soft hjul)	Forhjul 285 x 44 mm - baghjul 235 x 44 mm	

PANTHER ROLLATOR

Mobilex letvægtsrollatoren **Panther** har en blå aluminiumsramme. Rollatoren kan nemt foldes sammen og fylder meget lidt, i sammenfoldet stand, hvilket også gør den nem at transportere. Sædet er fremstillet af et langtidsholdbart materiale, der giver brugeren komfort og stabilitet. På forsiden er der monteret en aftagelig taske med to håndtag, som også kan bruges til indkøb. De store, bløde hjul gør rollatoren velegnet til både indendørs og udendørs brug; den er stabil og absorberer effektivt stød. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden og helt uden brug af værktøj. Rollatoren er udstyret med to låsbare bremses, der bremses på baghjulene. Der er en trædepedal integreret i bagrammen, for at gøre det nemmere at køre over mindre forhindringer. Rollatoren er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg og fås i to størrelser: standard og small.



En ny champagnerfarvet version af rollatoren kommer i 2024 i stedet for den blå model.

Mobilex rollator Panther	Standard 3180U1	Small 3180U2
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	78 - 101 cm	71 - 93 cm
Anbefalede brugerhøjde	150 - 195 cm	140 - 187 cm
Sædehøjde	62 cm	55 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	62 / 22 cm	62 / 22 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	43 cm	43 cm
Længde (dybde)	75,5 cm	75,5 cm
Vægt (+ taske 380 g)	6,73 kg	6,25 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	

PUMA AIR ROLLATOR

Puma Air er en nyudviklet udendørsrollator i en god kvalitet. Rollatoren er lavet i en matsort eller rød aluminiumsramme og udstyret med ekstra store 12" luftdæk (295 mm), der sørger for en god stabilitet og komfort - selv i et vanskeligt terræn. Skubbehåndtagene kan nemt justeres i højden og helt uden brug af værktøj. Derudover kan rollatoren nemt klappes sammen ved at trække håndtaget på sædet op. Som standard er Puma Air udstyret med: et rygbælte, en kopholder, en stokkeholder og en lukket taske. Takket være de store luftdæk er rollatoren særligt egnet til udendørsbrug, men da den kun er 65 cm bred kan den også sagtens bruges indendørs. Rollatoren vejer kun 9,78 kg i alt og er derfor også let at transportere. Den er testet og godkendt til en brugervægt op til 150 kg.



Puma Air Rollator	312501+02
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	82 - 99 cm
Anbefalede brugerhøjde	160 - 200 cm
Sædehøjde	59 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	65 cm / 26 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	40 cm
Længde (dybde)	76,4 cm
Vægt	9,78 kg
Maks. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion
Hjul	Forhjul og baghjul: 295 mm (12") x 45 mm



312560

Tilbehør:
 Bakke, som nemt kan monteres på rollatoren (i stedet for rygbæltet).



JAGUAR ROLLATOR



Jaguar rollatoren har en aluminiumsramme og kan let foldes sammen. Selvom rollatoren er lavet i en let konstruktion, er den meget stabil og kører ekstremt let. Rollatoren må kun bruges indendørs og er testet og godkendt til en brugervægt på maks 100 kg. Jaguar SUPREME har et særligt høj kvalitetsdesign med et moderne træløkk og sølvfarvede hjul. Rollatorbakken har samme moderne træløkk som dele af rammen.



312414



312416



312417

Rollator Jaguar	Forskellige farver	SUPREME
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	83,5 - 94,5 cm	90,3 - 96 cm
Mål af foldet rollator (H x W x D)	83,5 x 54,5 x 27 cm	90,3 x 56,5 x 27 cm
Total bredde	54,5 cm	56,5 cm
Længde (dybde) åben / sammenfoldet	66 cm / 27 cm	66 cm / 27 cm
Vægt	6,3 kg	6,0 kg
Max. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg	100 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)	

IMPALA ROLLATOR

Impala er en prisbillig letvægtsrollator med en blåmetallic aluminiumsramme. Rollatoren kan klappes sammen og fylder i sammenklappet stand minimalt. Rollatoren har som standard stokkeholder, polstret rygbælte og sæde, og har under sædet en praktisk taske. Rollatoren er forsynet med hjul på 200 mm, så den er anvendelig både ude og inde. Skubbehåndtagene er højdejusterbare, og forsynet med ergonomiske greb. Rollatoren er forsynet med to låsbare bremsehåndtag.



Mobilex rollator Impala	Standard Varenr. 312060	Høj Varenr. 312061	Bred Varenr. 312062
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	79 - 93 cm	90 - 105 cm	79 - 93 cm
Sædehøjde	53 cm	63 cm	53 cm
Total bredde åben / sammenfoldet	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	48 cm	49 cm	53 cm
Længde (dybde)	70 cm	75 cm	70 cm
Vægt	7,4 kg	7,9 kg	7,5 kg
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion		
Hjul	Forhjul og baghjul: 200 x 35 mm		


TILBEHØR

Et lille udvalg af tilbehør, der fås til vores Mobilex-rollatorer. Du kan finde hele udvalget i vores katalog eller på vores hjemmeside www.mobilex.dk.



Paraply


* Kun til Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo og Lion rollatorer

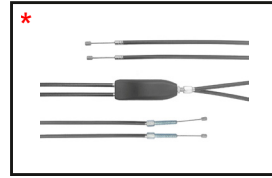

Enhåndsbremse



Iltflaskeholder

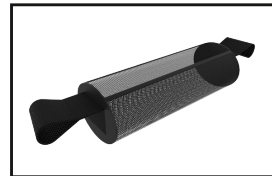

Nettaske



Ringeklokke



LED-lygte



Rygbælte



Bakke



Fast sæde



Taske med lynlås



Slæbebremse

BISON GANGBORD

Mobiled **Bison** gangbord er et bevægelseshjælpemiddel til at lære at træne aktiv gang. Det kan også bruges som støtte ved balanceproblemer. Rammen er lavet af pulverlakeret aluminium. Bison har mange indstillingsmuligheder: Armstøtterne kan meget let højdeindstilles ved hjælp af gasfjedrene. Håndtagene med bremsearme kan vinkelindstilles. Alle disse indstillinger kan foretages uden brug af værktøj. De håndbetjente bremses virker på baghjulene, og alle fire hjul er udstyret med låsbare bremses. Den smalle bredde gør det også muligt at passere smalle passager.



Gangbord Mobilex Bison	Varenr. 313300
Rammebredde på baghjulene	66,0 cm
Bredde på armstøtterne min. - max.	66,0 - 80,0 cm
Afstand mellem håndgreberne	34,0 cm
Højde min. - max.	102,2 - 143,0 cm
Længde	86,0 cm
Vægt	18,3 kg
Max. belastning	150 kg

DYNAWALK GANGBORD

DynaWalk gangbord er en mobilitetsstøtte til træning af gangfunktionen, og kan også bruges til at træne balanceproblemer. Rammen er fremstillet af pulverlakeret aluminium, og tilbyder flere indstillingsmuligheder. Armstøtterne er justerbare i højden og til siden, støttehåndtagene er vinkeljusterbare, og bredden er indstillelig. Der medleveres et bælte med sæde til støtte og sikkerhed når man går. Alle indstillinger kan foretages uden brug af værktøj.




Gangbord Mobilex DynaWalk	Varenr. 313001 HMI Nr. 79696	Varenr. 313002 HMI Nr. 79697
Max. belastning	135 kg	135 kg
Vægt	12,5 kg	12,5 kg
Længde	82 cm	82 cm
Bredde indstillelig	67,5 - 75 cm	67,5 - 75 cm
Højde af armstøtter indstillelig	100 - 123 cm	100 - 123 cm
Max. højde af håndgreb	136 cm	136 cm
Bremser for	2 låsbare bremses med fodpedal	2 låsbare bremses med fodpedal
Bremser bag	2 låsbare bremses med slæbebremse	2 håndbremses



MODERNE HJÆLPEMIDLER TIL SKARPE PRISER

Vi tilbyder et stort udvalg af hjælpemidler og reservedele til ældre og mennesker med funktionsnedsættelse. Alle vores Mobilex-produkter er af bedste kvalitet og imødekommer brugernes særlige behov.

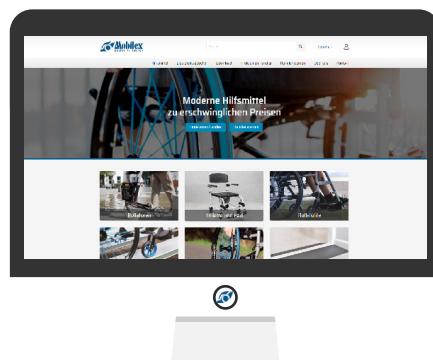

Kig forbi på www.mobilex.dk



Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg